

РУЧНЫЕ, КОАКСИАЛЬНЫЕ ИГЛЫ




UNICUT

Ручная биопсийная одноразовая игла

- Обеспечивает возможность неглубокого проникновения иглы и получения образцов малых размеров.
- Возможность использования внешней канюли в качестве коаксиальной иглы и проведения мультифокальной биопсии без дополнительного инструмента.

UNICUT - одноразовый ручная биопсийная игла для режущей биопсии, предназначена для получения гистологических образцов мягких тканей типа печени, почки, простаты, селезенки, узлов лимфы и различных других опухолей мягких тканей.

Принцип действия Unicut основан на механизме коаксиального слайдера.

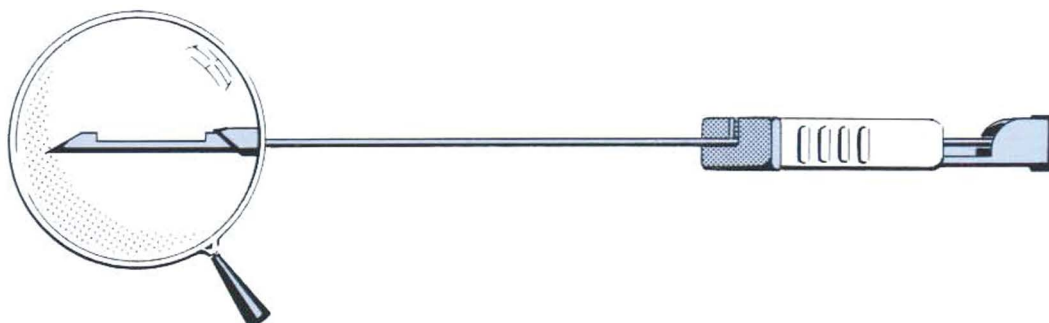

Инструкция по применению:

1. Перед началом процедуры примените местную анестезию.
2. Удалите стерильную упаковку и защитное покрытие иглы.
3. Процедура взятия образца ткани может производиться двумя способами:

I Способ:

- 1) Подведите к исследуемой области иглу со стилетом, полностью оттянутым назад, чтобы выемка для биоптата была закрыта.
- 2) Зафиксируйте иглу (канюлю) и продвиньте стилет в область биопсии.
- 3) Зафиксируйте стилет и быстро продвиньте вперед иглу (канюлю) для среза образца.

II Способ:

- 1) Введите в исследуемую область, на глубину как минимум 2 сантиметра, иглу со стилетом, полностью оттянутым назад, чтобы выемка для биоптата была закрыта.
- 2) Зафиксируйте стилет и оттяните иглу (канюлю) назад, таким образом, открывая выемку для биоптата.
- 3) Удерживая стилет, быстро продвиньте иглу (канюлю) вперед для среза образца.
4. Возможно извлечь несколько экземпляров биопсии в единственном проколе, используя внешнюю канюлю в качестве коаксиальной иглы. Для этого отсоедините стилет от канюли, слегка отогнув безопасный ограничитель на рукоятке иглы.
5. Удалите иглу и извлеките образец ткани. Поместите биопсийный материал в контейнер для дальнейших исследований.

Диаметр		Длина, см	Каталожный №
мм	G		
1,2	18	7,5	17420020
		11,5	17420060
		15	17420070
		20	17420080
1,4	17	7,5	17440020
		11,5	17440060
		15	17440070
		20	17440080
1,6	16	7,5	17460020
		11,5	17460060
		15	17460070
		20	17460080
2,1	14	7,5	17500020
		11,5	17500060
		15	17500070
		20	17500080

Количество в упаковке – 10 штук.