

ИНСТРУМЕНТЫ ТИПА MENGINI

AUTOVAC

Вакуумный автоматический одноразовый биопсийный инструмент для аспирационно-режущей биопсии

- Используется усовершенствованный MENGINI метод с помощью автоматической вакуумной биопсии.
- Позволяет получить самые большие образцы при наименьшем диаметре иглы.
- Возможность выбора 3-х глубин проникновения – 2, 3, 4 см.
- Простота использования благодаря малому весу конструкции.




AUTOVAC - одноразовый биопсийный инструмент, предназначен для чрескожных или проводимых во время операций проколов, для получения гистологические экземпляров биопсии мягких тканей типа печени, почки, простаты, селезенки, узлов лимфы и различных других опухолей мягких тканей.



Образец, полученный методикой режущей биопсии



Полноразмерный образец, полученный с помощью AUTOVAC

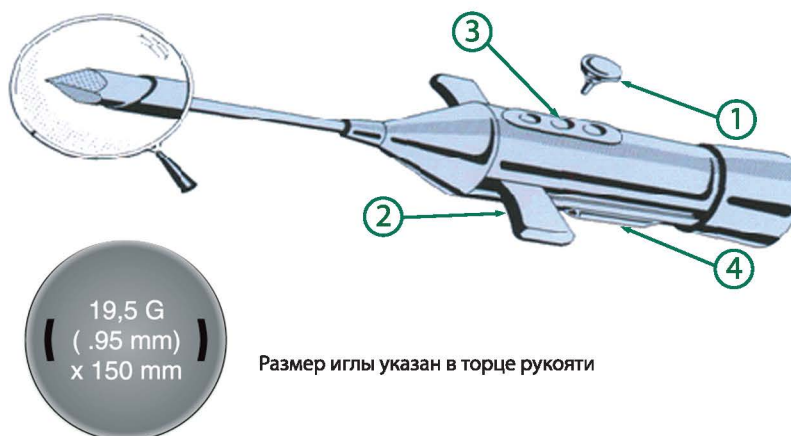

Размер иглы указан в торце рукоятки

Инструкция по применению:

1. Перед началом процедуры примените местную анестезию.
2. Удалите стерильную упаковку и защитное покрытие иглы. Подготовьте Autovac к использованию, для этой цели:
 - удалите ограничитель глубины проникновения (1);
 - взведите Autovac, потянув рычаг (2) до упора (до щелчка);
 - установите ограничитель глубины проникновения (1). Вы можете выбрать 3 варианта:
 - А) Позиция II (отметка на инструменте) – глубина проникновения 2 сантиметра.
 - Б) Позиция III (отметка на инструменте) – глубина проникновения 3 сантиметра.
 - В) Без установки ограничителя глубины – глубина проникновения 4 сантиметра.
3. Теперь Autovac готов к работе. Autovac используется под контролем УЗ, КТ или Рентген.
4. Чтобы получить образец ткани, нажмите спусковой механизм (4). Экземпляры биопсии извлекаются с помощью вакуума, который создается быстрым направленным движением канюли.
5. Для того чтобы вынуть образец ткани из канюли, медленно потяните рычаг (2) до упора. Поместите биопсийный материал в контейнер для дальнейших исследований
6. Обратите внимание! Возможно извлечь несколько экземпляров биопсии в единственном проколе, используя коаксиальные иглы. Коаксиальные иглы доступны в длинах 100, 150 и 200 мм во всех диаметрах.

AUTOVAC

Диаметр мм G		Длина, см	Каталожный №
0,8	21	10	17581151
		15	17581171
		20	17581181
0,95	19,5	5	17581231
		10	17581251
		15	17581271
1,2	18	20	17581281
		10	17581351
		15	17581371
1,4	17	20	17581381
		10	17581451
		15	17581471
		20	17581481

Количество в упаковке – 10 штук.