

АСПИРАЦИОННЫЕ ИГЛЫ И НАБОРЫ



CHIBA

Аспирационная биопсийная игла для ЦИТО биопсии

- Для подкожной холангиографии, цитологической биопсии и обычного подкожного применения.
- Эхогенная игла, видимая под УЗИ по всей длине.
- Игла модификации MS имеет особую выемку на внешней канюле, закругленный обтуратор и специальную геометрию кончика для лучшей эхогенности.

CHIBA – аспирационная биопсийная игла, предназначена для чрезкожной пункции внутренних органов и тканей для получения цитологических образцов.

Игла Chiba производится 2-х видов:

- 1) классический - со скошенным режущим краем и мандреном;
- 2) MS - со скошенным режущим краем и укороченным мандреном.


Иглы производятся из высококачественной стали и предназначены для разнообразных чрезкожных манипуляций.

Игла состоит из 2-х частей: внешней режущей канюли и внутреннего мандрена.

Обе конфигурации игл позволяют легко проникать через слои ткани и кожи.

Игла CHIBA MS благодаря специальной геометрии режущей кромки канюли позволяет свести к минимуму повреждение и перфорацию тканей.

Иглы снабжены коннектором Луер-ЛОК, который позволяет присоединять шприц для инъекции или аспирации.

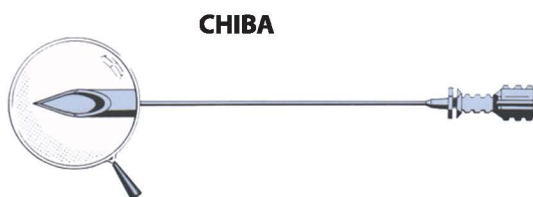

CHIBA



CHIBA-MS

CHIBA

Диаметр мм	Г	Длина, см	Каталожный №
0,6	23	9	16150040
		12	16150060
		15	16150070
		22	16150090
0,7	22	9	16160040
		12	16160060
		15	16160070
		22	16160090
		28	16160100
0,95	19,5	40	16160110
		9	16180040
		12	16180060
		15	16180070
		22	16180090
		28	16180100
		40	16180110

CHIBA-MS

Диаметр мм	Г	Длина, см	Каталожный №
0,6	23	9	16300040
		12	16300060
		15	16300070
		22	16300090
		28	16300100
0,7	22	9	16310040
		12	16310060
		15	16310070
		22	16310090
		28	16310100
		40	16310110
0,95	19,5	9	16330040
		12	16330060
		15	16330070
		22	16330090
		28	16330100
		40	16330110
1,2	18	15	16350070

Количество в упаковке – 10 штук.

Инструкция по применению:

1. Перед использованием проверить упаковку на предмет повреждений.
2. После извлечения иглы из упаковки пристегните фиксатор к игле, это позволит вводить иглу одной рукой и предотвратит смещение мандрена внутрь канюли в процессе введения иглы.
3. Выбор диаметра и длины иглы осуществляется в соответствии с требованиями процедуры в каждом конкретном случае.
4. Иглы могут применяться под контролем УЗИ, рентген и КТ.
5. Игла Chiba MS благодаря сокращенному внутреннему стилету и специальной геометрии края усиливает отражение ультразвука (двойное отражение), давая возможность получить более четкую видимость иглы при процедуре. Применяется как с линейными, так и с конвексными датчиками.