

АСПИРАЦИОННЫЕ ИГЛЫ И НАБОРЫ

HIST-O-CYT

Вакуумная аспирационная биопсийная игла для ГИСТО биопсии


- Сочетание пункционно-биопсийной методики Cut-Biopsy и самоаспирационной иглы Vascu-Cut.
- Конструкция рукоятки исключает необходимость использования шприца.
- Уникальная мембрана внутри канюли иглы обеспечивает аспирацию, создавая сильное отрицательное давление в процессе извлечения стилета из иглы.
- Уникальный принцип действия уменьшает время и увеличивает процедурный контроль.
- Широкий диапазон размеров соответствует практически всем требованиям.



HIST-O-CYT – одноразовая вакуумная аспирационная биопсийная игла, предназначена для получения гистологических образцов тканей печени, почки, простаты, лимфатических узлов и других мягких тканей.

Игла состоит из:

- внешняя режущая канюля с 2-мя боковыми вырезами и втулкой в виде конуса со встроенной герметичной внутренней мембраной;
- трехгранный стилет с маркировкой диаметра (G/см).

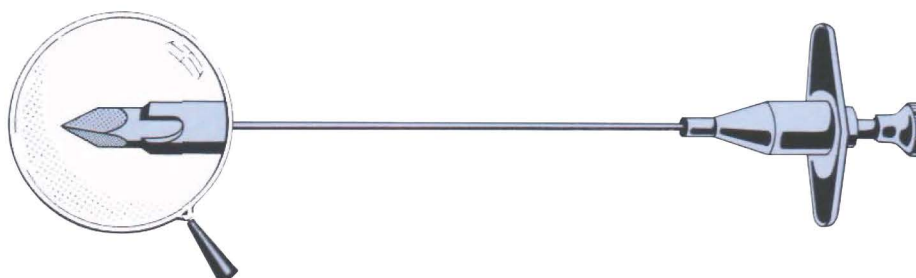

Инструкция по применению:

1. Перед началом процедуры примените местную анестезию.
2. Удалите стерильную упаковку и защитное покрытие иглы.
3. Осторожно вставьте стилет внутрь канюли, пройдите мембрану и продвиньте до конца.
4. Проводите прокол через кожу и далее до момента, когда стилет соприкоснется с областью забора образца.
5. Введите иглу в исследуемую область, втяните стилет (около ¾ его длины). При этом будет создаваться вакуум, который удержит цилиндр ткани внутри канюли.
6. Круговым движением по часовой стрелке вверните канюлю в область забора образца. Образец ткани в этот момент будет размещаться внутри канюли под воздействием вакуума. Наклонный нажим поможет облегчить удаление образца плотной ткани.
7. Извлеките иглу, сохраняя вакуум. При помощи стилета аккуратно вытолкните биопсийный материал из канюли и поместите в контейнер для дальнейших исследований.
8. Та же техника может использоваться для получения цитологических образцов, так как вакуум также позволяет извлекать жидкие фракции ткани.

HIST-O-CYT

Диаметр мм G		Длина, см	Каталожный №
0,8	21	10	17200050
		15	17200070
		20	17200080
0,95	19,5	10	17210050
		15	17210070
		20	17210080
1,2	18	10	17230050
		15	17230070
		20	17230080

Количество в упаковке – 10 штук.