

АСПИРАЦИОННЫЕ ИГЛЫ И НАБОРЫ



VACU-CUT


Вакуумная аспирационная биопсийная игла для ГИСТО биопсии

- Конструкция рукоятки исключает необходимость использования шприца.
- Уникальная мембрана внутри канюли иглы обеспечивает аспирацию, создавая сильное отрицательное давление в процессе извлечения стилета из иглы.
- Уникальный принцип действия уменьшает время и увеличивает процедурный контроль.
- Широкий диапазон размеров соответствует практически всем требованиям.

VACU-CUT – одноразовая вакуумная аспирационная биопсийная игла, предназначена для получения гистологических образцов тканей печени, почки, простаты, лимфатических узлов и других мягких тканей.

Игла состоит из:

- внешняя режущая канюля с округлым наконечником и втулкой в виде конуса со встроенной герметичной внутренней мембраной;
- трехгранный стилет с маркировкой диаметра (G/cm).

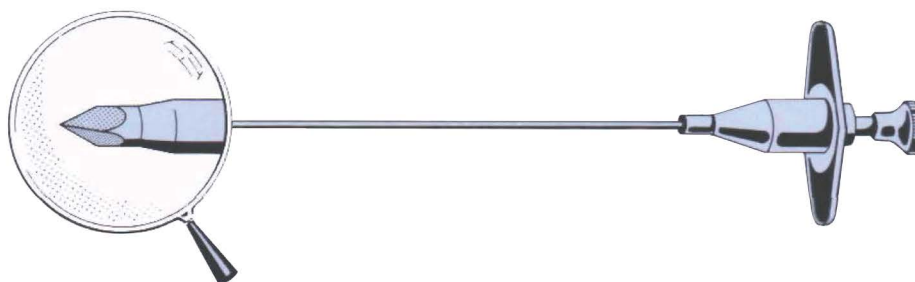

Инструкция по применению:

1. Перед началом процедуры примените местную анестезию.
2. Удалите стерильную упаковку и защитное покрытие иглы.
3. Осторожно вставьте стилет внутрь канюли, пройдите мембрану и продвиньте до конца.
4. Проводите прокол через кожу и далее до момента, когда стилет соприкоснется с областью забора образца.
5. Введите иглу в исследуемую область, втяните стилет (около ¾ его длины). При этом будет создаваться вакуум, который удержит цилиндр ткани внутри канюли.
6. Введите канюлю в область забора образца. Образец ткани в этот момент будет размещаться внутри канюли под воздействием вакуума.
7. Извлеките иглу, сохраняя вакуум. При помощи стилета аккуратно вытолкните биопсийный материал из канюли и поместите в контейнер для дальнейших исследований.
8. Та же техника может использоваться для получения цитологических образцов, так как вакуум также позволяет извлекать жидкие фракции ткани.

Диаметр		Длина, см	Каталожный №
мм	G		
0,7	22	10	17600050
		15	17600070
		20	17600080
0,8	21	10	17610050
		15	17610070
		20	17610080
0,95	19,5	10	17620050
		15	17620070
		20	17620080
1,2	18	5	17640010
		10	17640050
		15	17640070
		20	17640080

Количество в упаковке – 10 штук.