



OSTYUCUT



Набор для биопсии кости (костной ткани)

- Уникальная резьбовая атравматичная геометрия кончика канюли иглы.
- Возможность использования многоразовой эргономичной рукоятки.

OSTYUCUT – набор для биопсии костной ткани, предназначен для получения гистологических образцов. Дополнительно к набору предлагается многоразовая рукоятка.

Набор состоит из:

- режущая канюля с резьбой на конце;
- стилет с 3-гранной лазерной заточкой;
- металлический obturator для выталкивания образца;
- шприц 10 см³ с коннектором Луер-Лок (с резьбой).

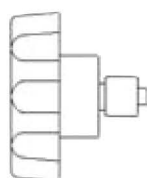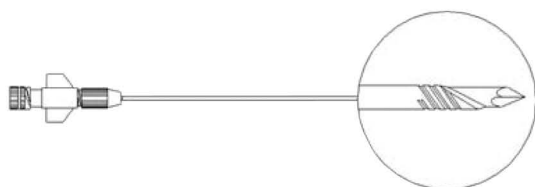

Инструкция по применению:

1. Перед началом процедуры примените местную анестезию.
2. Вставьте стилет внутрь канюли и проводите прокол через кожу до момента, когда стилет соприкоснется с костью.
3. Круговым движением по часовой стрелке слегка поверните канюлю в стенку кости. Извлеките стилет. Присоедините к канюле рукоятку. Продолжайте прокол путем вращения рукоятки по часовой стрелке до момента достижения канюлей внутренней стенки кости, т.к. это обеспечит более легкое отделение цилиндра ткани.
4. Отсоедините рукоятку. Присоедините шприц на место рукоятки. Оттяните поршень шприца и зафиксируйте его на 1-м или 2-м положении фиксатора шприца. Это позволит зафиксировать биопсийный материал внутри канюли с помощью создавшегося вакуума и полностью исключит потерю образца при извлечении канюли.
5. Извлеките канюлю со шприцом. Отсоедините шприц. При помощи металлического obturator вытолкните биопсийный материал из канюли в контейнер для дальнейших исследований.



OSTYUCUT

Диаметр мм G		Длина, см	Каталожный №
1,4	17	5	17800010
		7,5	17800020
		10	17800050
		12,5	17800060
		15	17800070
1,6	16	5	17820010
		7,5	17820020
		10	17820050
		12,5	17820060
		15	17820070
1,8	15	5	17840010
		7,5	17840020
		10	17840050
		12,5	17840060
		15	17840070
2,0	14,5	5	17860010
		7,5	17860020
		10	17860050
		12,5	17860060
		15	17860070
2,2	13,5	10	17880050
		15	17880070
2,4	13	10	17900050
		15	17900070
Многоразовая рукоятка			179200100

Количество в упаковке – 10 штук.