


UROSOFT® Управляемые уретеральные стенты

УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНТ КОМБИСТЕНТ™ СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ SACHSE


КОМБИСТЕНТ™ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНТ

Состав комплекта:

- Уретеральный стент
- Система толкателя с внутренним катетером
- Проводник с подвижным сердечником
- Простая и безопасная операция, т.к.
 - предварительная сборка позволяет выполнять извлечение и предоставляет коэффициент вращения 1:1 системы стента
 - проводник с подвижным сердечником облегчает выполнение манипуляций наконечником стента и прохождение через извилистую структуру
- Мягкий полиуретан
- Низкая тенденция к образованию налета
- Комфорт пациента

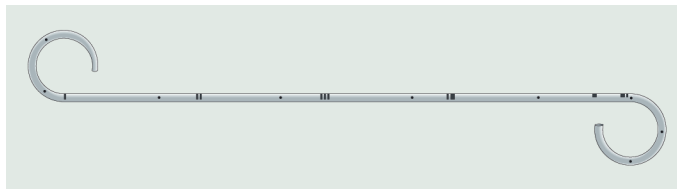


уретеральный стент

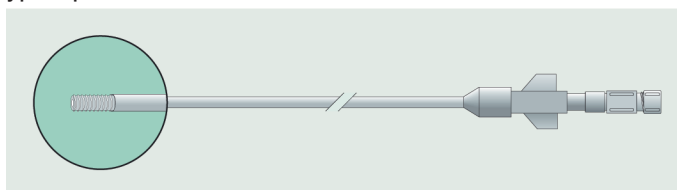

система толкателя с внутренним катетером




проводник с подвижным сердечником

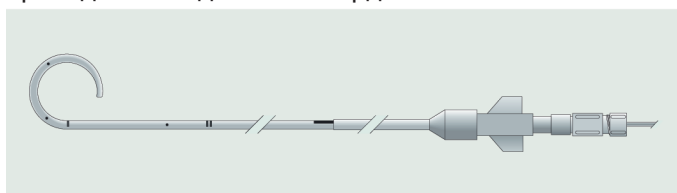


собранное состояние

ВАРИАНТЫ НАКОНЕЧНИКОВ

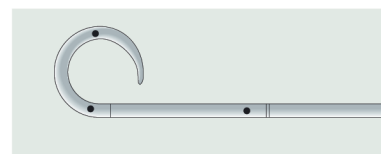

пеосредством цистоскопа
наконечник Tiemann

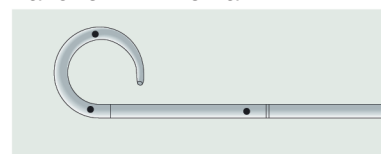


наконечник с открытым концом


Управляемые уретеральные стенты UROSOFT®

УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНТ КОМБИСТЕНТ™
СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ SACHSE


1. Проводник следует аккуратно протолкнуть вперед в полностью выпрямленный уретеральный стент и можно зафиксировать с помощью адаптера Tuohy-Borst.

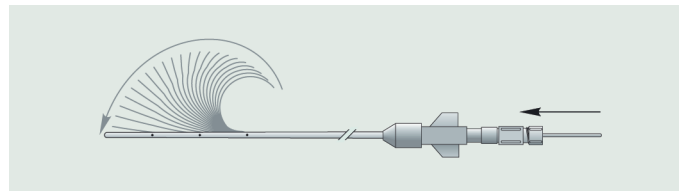

2. Стент цистоскопически вставлен в мочеточник.

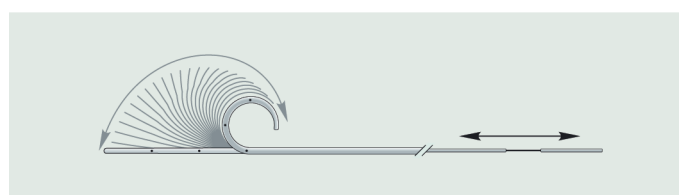

3. Можно манипулировать с формой дистального наконечника уретерального стента посредством втягивания подвижного сердечника проводника. Новое соединительное устройство позволяет выполнять вращение стента с коэффициентом 1:1. При необходимости можно извлечь стент.

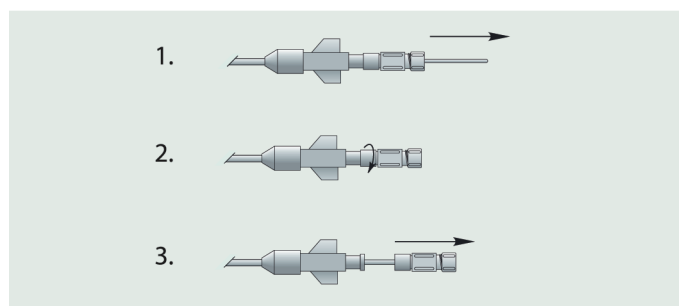

4. Толкатель отсоединяется от стента после его правильного расположения следующим образом:

- 1) Снять проводник после открытия адаптера Tuohy-Borst.
- 2) Взяться за крыловидный адаптер и повернуть закручивающийся колпачок влево.
- 3) Вынуть внутренний катетер из системы толкателя.
- 4) Вынуть толкатель.

Тип	Ø [F]	Длина стержня [см]	Общая длина [см]	посредством цистоскопа с наконечником Тиманна	наконечник с открытым концом
КОМБИСТЕНТ™ предварительно собранный, управляемый уретеральный стент	6	20	24	57650020	57700020
		22	26	57650030	57700030
		24	28	57650040	57700040
		26	30	57650050	57700050
		28	32	57650060	57700060
	7	20	24	57660020	57710020
		22	26	57660030	57710030
		24	28	57660040	57710040
		26	30	57660050	57710050
		28	32	57660060	57710060
	8	20	24	57670020	-
		22	26	57670030	-
		24	28	57670040	-
		26	30	57670050	-
		28	32	57670060	-

Минимальное количество при заказе: 10 единиц