

UROSOFT® Управляемые уретеральные стенты

УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНТ КОМБИСТЕНТ™ ДЛЯ МОЧЕТОЧНИКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ SACHSE

КОМБИСТЕНТ™ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ СТЕНТ ДЛЯ МОЧЕТОЧНИКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ


Состав комплекта:

- Сtent для опухолей серии UROSOFT®, с наконечником с открытым концом
- Система толкателя с внутренним катетером
- Проводник с подвижным сердечником


Компания Bard / Angiomed разработала особенно эффективные уретеральные стенты в качестве временного, а также паллиативного средства внутреннего дренажа мочи, когда в мочеполовом тракте присутствуют опухоли.

Специальный дизайн стента для опухолей компании Bard / Angiomed гарантирует оптимальный дренаж даже в случаях, когда мочеточник чрезмерно сжат.

Мягкий материал секции pigtail предлагает наивысшую степень комфорта пациенту, а специальная усиленная часть стержня предотвращает разрушение стента. Боковые отверстия данного стента стратегически расположены так, чтобы предоставить дренаж и предотвратить рост ткани в стент.

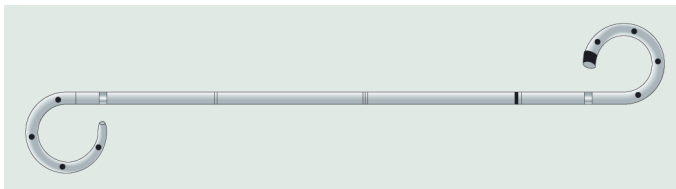


стент для опухолей

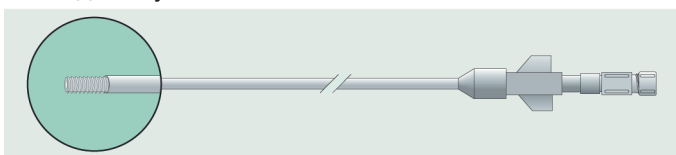

система толкателя с внутренним катетером



проводник с подвижным сердечником

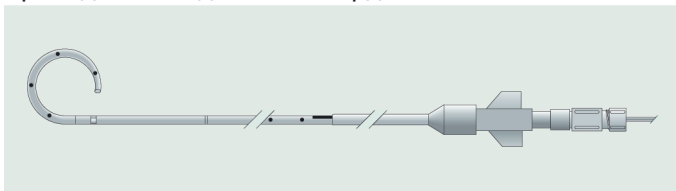


собранное состояние

- Простое и безопасное использование, т.к.
 - предварительная сборка позволяет выполнять извлечение и предоставляет коэффициент вращения 1:1 системы стента
- проводник с подвижным сердечником облегчает выполнение манипуляций наконечником стента и прохождение через извилистую структуру
- Специальный дизайн стента для опухолей гарантирует оптимальный дренаж
- Мягкий полиуретан
- Низкая тенденция к инкрустации
- Комфорт пациента


Управляемые уретеральные стенты UROSOFT®

УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНТ КОМБИСТЕНТ™ ДЛЯ МОЧЕТОЧНИКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ SACHSE

1. Проводник следует аккуратно протолкнуть вперед в полностью выпрямленный уретеральный стент и можно зафиксировать с помощью адаптера Tuohy-Borst.

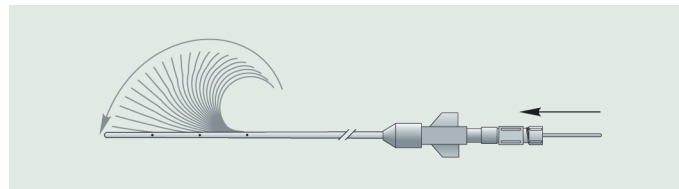


2. Стент цистоскопически вставлен в мочеточник.

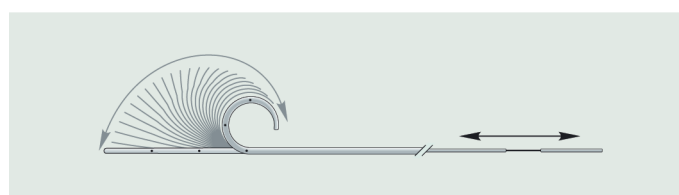

3. Можно манипулировать с формой дистального наконечника уретерального стента посредством вытягивания подвижного сердечника проводника. Новое соединительное устройство позволяет выполнять вращение стента с коэффициентом 1:1. При необходимости можно извлечь стент.

4. Толкатель отсоединяется от стента после его правильного расположения следующим образом:

- 1) Снять проводник после открытия адаптера Tuohy-Borst.
- 2) Взяться за крыловидный адаптер и повернуть закручивающийся колпачок влево.
- 3) Вынуть внутренний катетер из системы толкателя.
- 4) Вынуть толкатель.

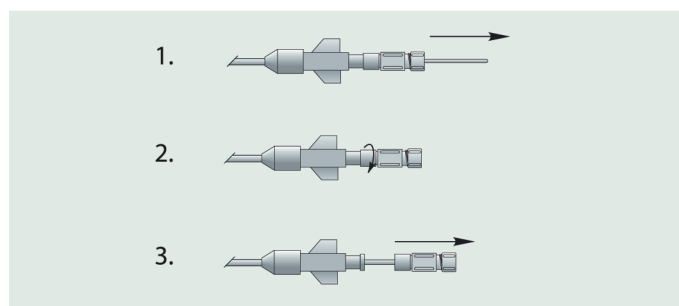

Тип	Ø [F]	Длина стержня [см]	Общая длина [см]	Наконечник с открытым концом
Kombistent™ предварительно собранный, регулируемый стент для мочеточниковых опухолей согласно методике Sachse	6	20	24	56390020
		22	26	56390030
		24	28	56390040
		26	30	56390050
		28	32	56390060
	7	20	24	56391020
		22	26	56391030
		24	28	56391040
		26	30	56391050
		28	32	56391060
	8	20	24	56392020
		22	26	56392030
		24	28	56392040
		26	30	56392050
		28	32	56392060

Минимальное количество при заказе: 5 единиц