


UROSOF[®] Управляемые уретеральные стенты

УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНД UROPATH[™]


UROPATH[™] ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНТ

Состав комплекта:

- Уретеральный стент
- Система толкателя с внутренним катетером
- Проводник с подвижным сердечником
- Простая и безопасная операция, т.к.
 - предварительная сборка позволяет выполнять извлечение и предоставляет коэффициент вращения 1:1 системы стента
 - проводник с подвижным сердечником облегчает выполнение манипуляций наконечником стента и прохождение через извилистую структуру
- Мягкий полиуретан
- Низкая тенденция к инкрустации
- Комфорт пациента

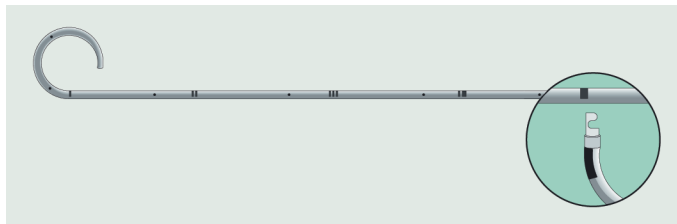


уретеральный стент

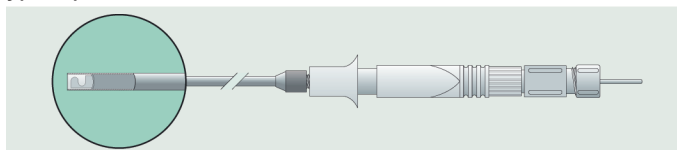

система толкателя с внутренним катетером




проводник с подвижным сердечником

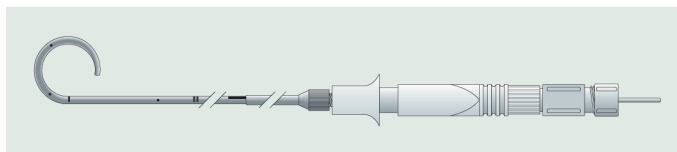


собранное состояние


ВАРИАНТЫ НАКОНЕЧНИКОВ

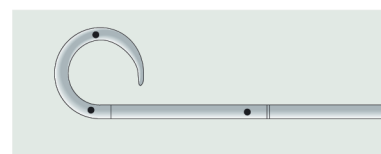

посредством цистоскопа

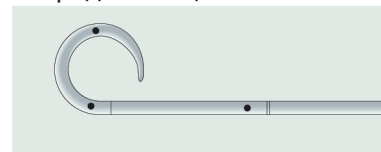

посредством цистоскопа
наконечник Tiemann

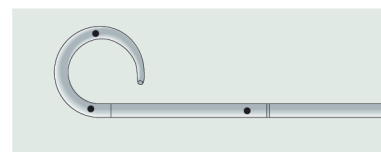


наконечник с открытым концом

Управляемые уретеральные стенты UROSOFT®


СТЕНТ UROPATH ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ УРЕНТРАЛЬНЫЙ СТЕНТ

1. Проводник следует аккуратно протолкнуть вперед в полностью выпрямленный уретеральный стент и можно зафиксировать с помощью адаптера Tuohy-Borst.

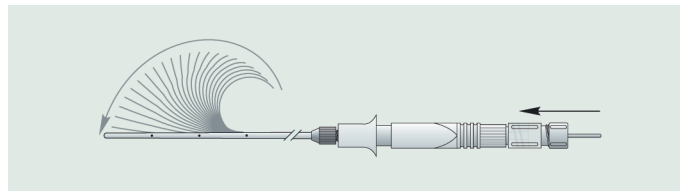


2. Стент цистоскопически вставлен в мочеточник.

3. Можно манипулировать с формой дистального наконечника уретерального стента посредством вытягивания подвижного сердечника проводника. Новое соединительное устройство позволяет выполнять вращение стента с коэффициентом 1:1. При необходимости можно извлечь стент.

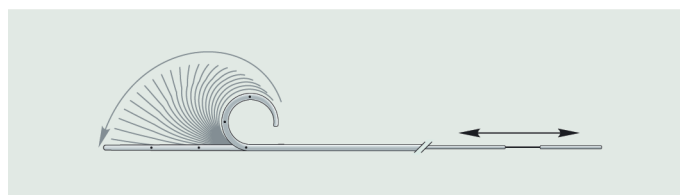

4. Толкатель отсоединяется от стента после его правильного расположения следующим образом:

- 1) Снять проводник после открытия адаптера Tuohy-Borst.
- 2) Оттянуть назад воронкообразную часть ручки.
- 3) Вынуть систему толкателя после освобождения соединения.

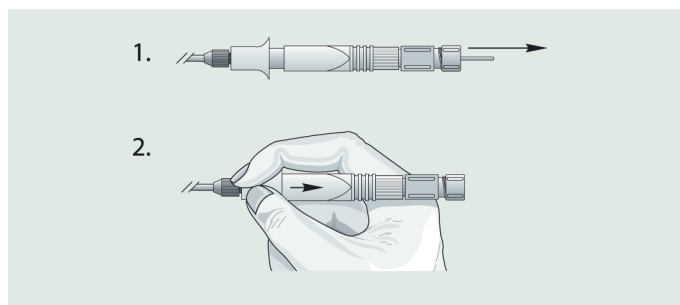

Тип	Ø [F]	Длина стержня [см]	Общая длина [см]	посредством цистоскопа	посредством цистоскопа с наконечником Тиманна	Наконечник с открытым концом
Uropath предварительно собранный, управляемый уретеральный стент	6	20	24	86400020	86500020	86450020
		22	26	86400030	86500030	86450030
		24	28	86400040	86500040	86450040
		26	30	86400050	86500050	86450050
		28	32	86400060	86500060	86450060
		20	24	86410020	86510020	86460020
	7	22	26	86410030	86510030	86460030
		24	28	86410040	86510040	86460040
		26	30	86410050	86510050	86460050
		28	32	86410060	86510060	86460060
		20	24	86420020	86520020	86470020
		22	26	86420030	86520030	86470030
	8	24	28	86420040	86520040	86470040
		26	30	86420050	86520050	86470050
		28	32	86420060	86520060	86470060

Минимальное количество при заказе: 10 единиц