

PUROFLEX® Уретеральные стенты

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ И УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ И УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ


Состав комплекта:

- Проводник с покрытием из PTFE*, прямой, с фиксированным сердечником
- Толкатель
- Уретеральный стент с наконечником с открытым концом
- Уретеральный катетер Selec-Tip® со стилетом и инъекционным адаптером

Создание данного комплекта является ответом компании Bard / Angiomed на потребность заказчиков в инструменте со сменной комбинацией компонентов для проведения зондирования, визуализации с применением контрастного вещества и последующего стентирования мочеточника.

Уретеральный катетер с открытым концом Selec-Tip® с манипуляционным наконечником используется для зондирования. Зондирование устья мочеточника и мочеточника до почечной лоханки упрощается благодаря наличию подвижного наконечника уретерального катетера. Визуализация мочеточника с применением контрастного вещества может осуществляться посредством снятия стилета уретерального катетера и установки инъекционного адаптера, входящего в состав комплекта.

После установки уретерального катетера Selec-Tip® стилет может быть заменен на проводник, входящий в состав комплекта. После этого уретеральный катетер снимается, и становится возможным безопасное введение уретерального стента с открытым концом поверх проводника.

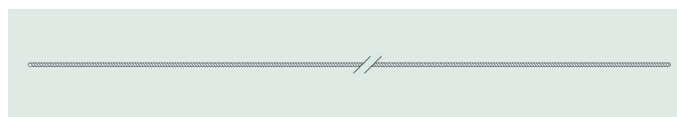


проводник



толкатель




уретеральный стент

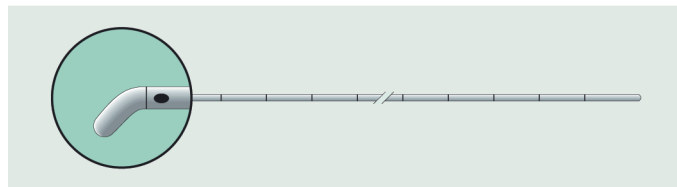

уретеральный катетер Selec-Tip



стилет

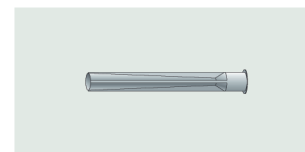

инъекционный адаптер

Тип	Уретеральный катетер - Ø [F]	Стент - Ø [F]	Длина стержня стента [см]	Общая длина стента [см]	Номер по каталогу
Комплект для зондирования и уретерального стентирования	5	6	20	24	56861030
			22	26	56861040
			24	28	56861050
	5	7	20	24	56862030
			22	26	56862040
			24	28	56862050

Минимальное количество при заказе: 10 единиц

* PTFE (политетрафторэтилен) и FEP (перфторо (этилен-пропилен)-сополимер) относятся к группе полигалогеновых олефинов и характеризуются низким коэффициентом трения, отсутствием липкости и превосходной химической стабильностью.