

PUROFLEX® Управляемые уретеральные стенты


УРЕНТРАЛЬНЫЙ СТЕНТ UROPATH

UROPATH ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ УРЕНТРАЛЬНЫЙ СТЕНТ


Состав комплекта:

- Уретеральный стент
- Система толкателя с внутренним катетером
- Проводник с подвижным сердечником

- Простая и безопасная операция, т.к.
 - предварительная сборка позволяет выполнять извлечение и предоставляет коэффициент вращения 1:1 системы стента
 - проводник с подвижным сердечником облегчает выполнение манипуляций наконечником стента и прохождение через извилистую структуру
- Мягкий полиуретан
- Низкая тенденция к инкрустации
- Комфорт пациента

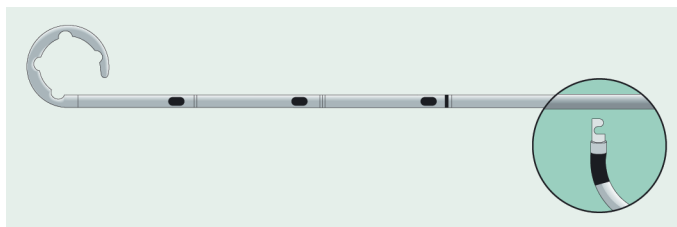


уретеральный стент

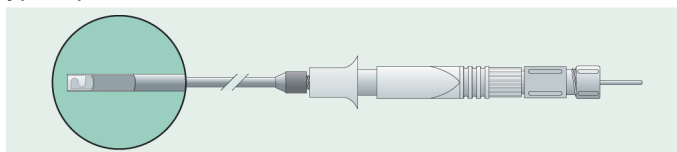

система толкателя с внутренним катетером




проводник с подвижным сердечником

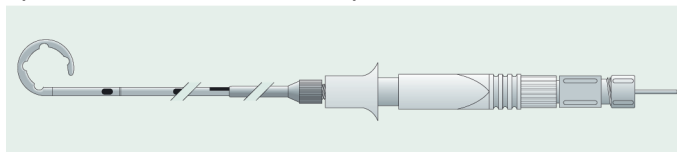


собранное состояние


ВАРИАНТЫ НАКОНЕЧНИКОВ

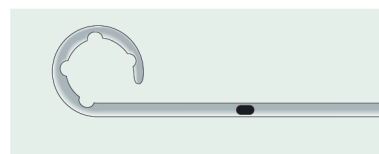

посредством цистоскопа

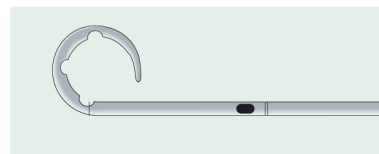

посредством цистоскопа
наконечник Tiemann

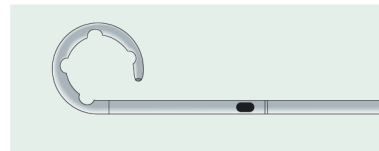


наконечник с открытым концом

Управляемы уретеральные стенты PUROFLEX®


УРЕНТРАЛЬНЫЙ СТЕНТ UROPATH

1. Проводник следует аккуратно протолкнуть вперед в полностью выпрямленный уретеральный стент и можно зафиксировать с помощью адаптера Tuohy-Borst.

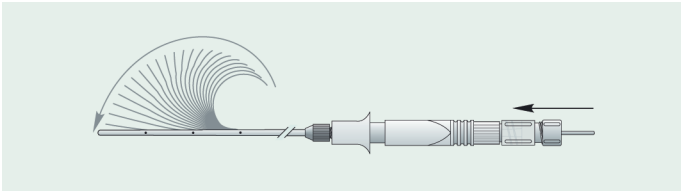


2. Стент цистоскопически вставлен в мочеточник.

3. Можно манипулировать с формой дистального наконечника уретерального стента посредством втягивания подвижного сердечника проводника. Новое соединительное устройство позволяет выполнять вращение стента с коэффициентом 1:1. При необходимости можно извлечь стент.

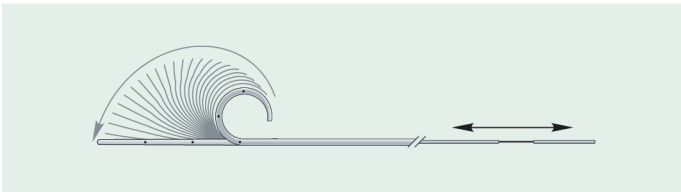

4. Толкатель отсоединяется от стента после его правильного расположения следующим образом:

- 1) Снять проводник после открытия адаптера Tuohy-Borst.
- 2) Оттянуть назад воронкообразную часть ручки.
- 3) Вынуть систему толкателя после освобождения соединения.

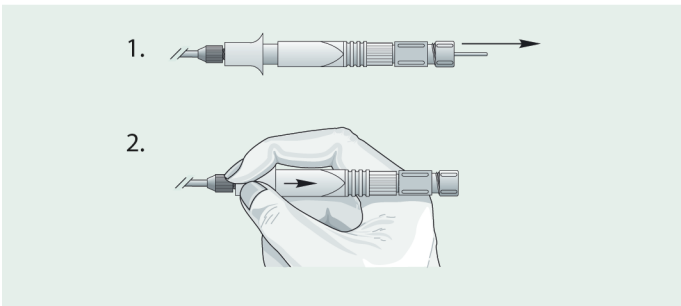

Тип	Ø [F]	Длина стержня [см]	Общая длина [см]	посредством цистоскопа	посредством цистоскопа с наконечником Тиманна	Наконечник с открытым концом
Стент Uropath предварительно собранный, управляемый уретеральный стент	6	20	24	86050020	86150020	86100020
		22	26	86050030	86150030	86100030
		24	28	86050040	86150040	86100040
		26	30	86050050	86150050	86100050
		28	32	86050060	86150060	86100060
	7	20	24	8606002D	86160020	86110020
		22	26	86060030	36160030	86110030
		24	28	86060040	86160040	86110040
		26	30	86060050	86160050	86110050
		28	32	86060060	86160060	86110060
	8	20	24	86070020	86170020	86120020
		22	26	86070030	86170030	86120030
		24	28	86070040	86170040	86120040
		26	30	86070050	86170050	86120050
		28	32	86070060	86170060	86120060

Минимальное количество при заказе: 10 единиц