

GREY® Уретеральные стенты


УРЕНТРАЛЬНЫЙ СТЕНТ UROPATH

UROPATH ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ УРЕНТРАЛЬНЫЙ СТЕНТ


Состав комплекта:

- Уретеральный стент
- Система толкателя с внутренним катетером
- Проводник с подвижным сердечником

- Простая и безопасная операция, т.к.
 - предварительная сборка позволяет выполнять извлечение и предоставляет коэффициент вращения 1:1 системы стента
 - проводник с подвижным сердечником облегчает выполнение манипуляций наконечником стента и прохождение через извилистую структуру
- Мягкий полиуретан
- Низкая тенденция к инкрустации
- Комфорт пациента

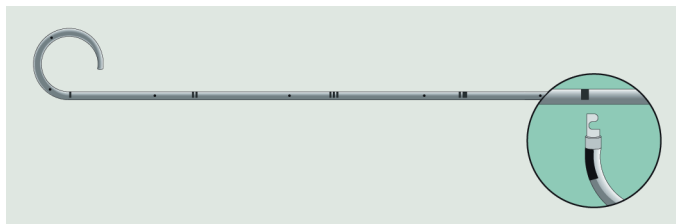


уретеральный стент

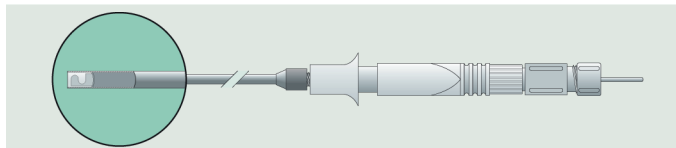

система толкателя с внутренним катетером




проводник с подвижным сердечником

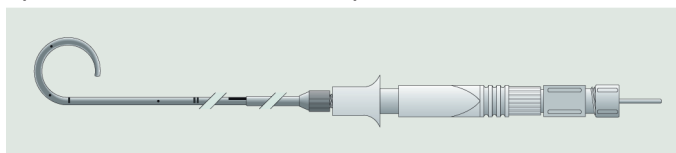


собранное состояние


ВАРИАНТЫ НАКОНЕЧНИКОВ

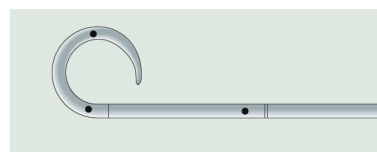

посредством цистоскопа

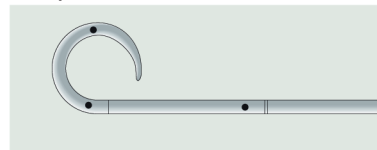

посредством цистоскопа
наконечник Tiemann

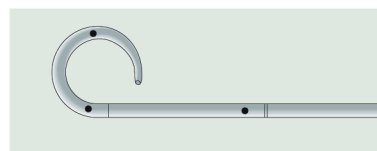


наконечник с открытым
концом

Уретеральные стенты GREY®


УРЕНТРАЛЬНЫЙ СТЕНТ UROPATH

1. Проводник следует аккуратно протолкнуть вперед в полностью выпрямленный уретеральный стент и можно зафиксировать с помощью адаптера Tuohy-Borst.

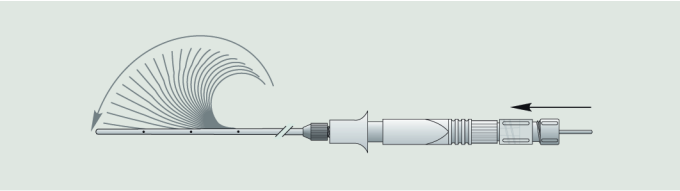


2. Стент цистоскопически вставлен в мочеточник.

3. Можно манипулировать с формой дистального наконечника уретерального стента посредством втягивания подвижного сердечника проводника. Новое соединительное устройство позволяет выполнять вращение стента с коэффициентом 1:1. При необходимости можно извлечь стент.

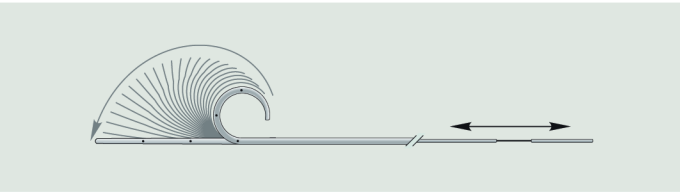

4. Толкатель отсоединяется от стента после его правильного расположения следующим образом:
1) Снять проводник после открытия адаптера Tuohy-Borst.
2) Оттянуть назад воронкообразную часть ручки.
3) Вынуть систему толкателя после освобождения соединения.

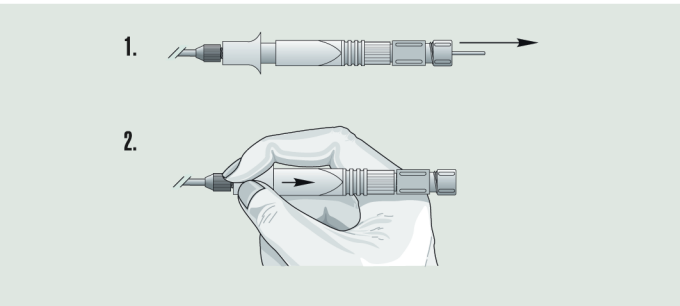

Тип	Ø	Длина стержня	Общая длина	посредством цистоскопа	посредством цистоскопа	наконечник с открытым
	[F]	[см]	[см]		с наконечником Тиманна	концом
Стент Uropath предварительно собранный, управляемый уретеральный стент	6	20	24	86700020	86800020	86750020
		22	26	86700030	86800030	86750030
		24	28	86700040	86800040	86750040
		26	30	86700050	86800050	86750050
		28	32	86700060	86800060	86750060
	7	20	24	86710020	86810020	86760020
		22	26	86710030	86810030	86760030
		24	28	86710040	86810040	86760040
		26	30	86710050	86810050	86760050
		28	32	86710060	86810060	86760060
	8	20	24	86720020	86520020	86770020
		22	26	86720030	86520030	86770030
		24	28	86720040	86520040	86770040
		26	30	86720050	86520050	86770050
		28	32	86720060	86520060	86770060

Минимальное количество при заказе: 10 единиц