

MEMOTERM®

ПРЕДСТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНТ / БУЛЬБАРНЫЙ СТЕНТ

СТЕНТ MEMOTERM СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОДПУЗЫРНЫХ ОБСТРУКЦИЙ.

ПРЕДСТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНТ БУЛЬБАРНЫЙ СТЕНТ

Показания для установки предстательного стента:

- доброкачественная гиперплазия предстательной железы
- обструкция при раке предстательной железы

Показания для установки бульбарного стента:



- Рецидивирующие стриктуры бульбарного отдела уретеры

Предстательный стент / бульбарный стент
MEMOTERM®:

- Как правило, имплантации стента может быть выполнена под местной анестезией
- Установка стента проводится под контролем цистоскопии
- После полной имплантации положение стента может быть изменено при помощи корректирующего устройства
- Эндоскопический осмотр возможно провести в любое время
- Примерно через 3 месяца, стент покрывается уротелием
- Удаление стента возможно на сроке до 2 недель после размещения

Преимущества применения нового устройства:

- Более совершенное и простое управление
- Возможна фиксация оптики
- Клипса-держатель (регулируемая) для светового кабеля

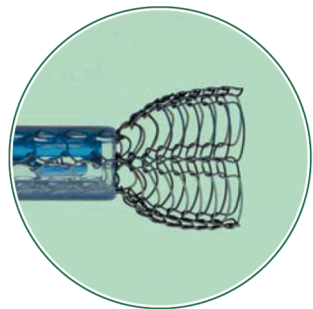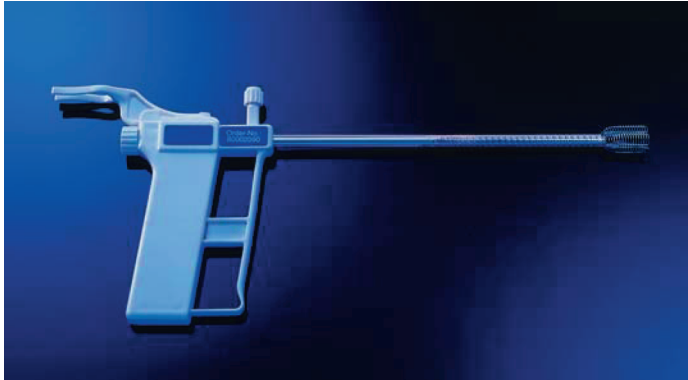

Тип	Стент -Ø (раскрытый) [F]	Длина стента * [мм]	№ для заказа
Предстательный стент MEMOTERM®	42	15	80002000
		20	80002010
		25	80002020
		30	80002030
		35	80002040
		40	80002050
		45	80002060
		50	80002070
		55	80002080
		60	80002090
Бульбарный стент MEMOTERM®	36	20	80013010
		30	80013030
		40	80013050
		45	80013060
		50	80013070

* Заявленная длина стента представляет собой длину после раскрытия

Минимальный объем заказа: 1 единица