

UROSOF[®] Уретеральные стенты

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ И УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ И УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ


Состав комплекта:

- Проводник с покрытием из PTFE*, прямой, с фиксированным сердечником
- Толкатель
- Уретеральный стент с наконечником с открытым концом
- Уретеральный катетер Selec-Tip[®] со стилетом и инъекционным адаптером

Создание данного комплекта является ответом компании Bard / Angiomed на потребность заказчиков в инструменте со сменной комбинацией компонентов для проведения зондирования, визуализации с применением контрастного вещества и последующего стентирования мочеточника.

Уретеральный катетер с открытым концом Selec-Tip[®] с манипуляционным наконечником используется для зондирования. Зондирование устья мочеточника и мочеточника до почечной лоханки упрощается благодаря наличию подвижного наконечника уретерального катетера. Визуализация мочеточника с применением контрастного вещества может осуществляться посредством снятия стилета уретерального катетера и установки инъекционного адаптера, входящего в состав комплекта.

После установки уретерального катетера Selec-Tip[®] стилет может быть заменен на проводник, входящий в состав комплекта. После этого уретеральный катетер снимается, и становится возможным безопасное введение уретерального стента с открытым концом поверх проводника.

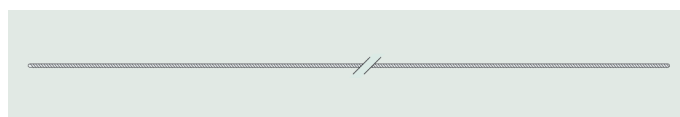


проводник



толкатель



уретеральный стент

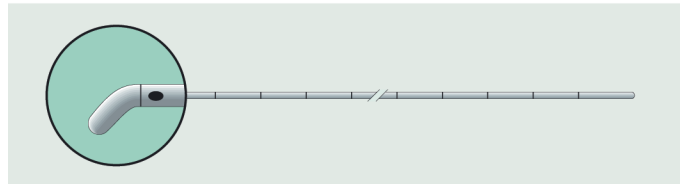

уретеральный катетер Selec-Tip



стилет



инъекционный адаптер

* PTFE (политетрафторэтилен) и FEP (перфторо (этилен-пропилен)-сополимер) относятся к группе полигалогеновых олефинов и характеризуются низким коэффициентом трения, отсутствием липкости и превосходной химической стабильностью.

Уретеральные стенты UROSOFT®

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ И УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ

Компоненты комплектов 4,7 F :

• Уретеральный стент

Размер:	4 , 7 F
Длина:	См. таблицу
Материал:	Мягкий полиуретан

• Уретеральный катетер

Размер:	4 F
Длина:	69 см
Конфигурация:	Цилиндрический, изогнутый
Боковое отверстие:	Отсутствует
Стилет:	0.5 мм x 69 см
Материал:	Полиамид

• Проводник

ø:	.032i
Конфигурация:	Покрытие PTFE*, прямой, fixed core
Длина:	150 см

• Толкатель

Длина:	41 см
Цвет:	зеленый

Компоненты комплектов 6 F и 7 F :

• Уретеральный стент

Размер:	6 F / 7 F
Длина:	См. таблицу
Материал:	Мягкий полиуретан

• Уретеральный катетер

Размер:	5 F
Длина:	69 см
Конфигурация:	Цилиндрический, изогнутый
Боковое отверстие:	Отсутствует
Стилет:	0.5 мм x 69 см
Материал:	Полиамид

• Проводник

ø:	.035i
Конфигурация:	Покрытие PTFE*, прямой, fixed core
Длина:	150 см

• Толкатель

Длина:	41 см
Цвет:	прозрачный

Компоненты комплектов 8 F и 9 F :

• Уретеральный стент

F-размер:	8 F / 9 F
Длина:	См. таблицу
Материал:	Мягкий полиуретан

• Уретеральный катетер

F-size:	6 F
Длина:	69 см
Конфигурация:	Цилиндрический, изогнутый
Боковое отверстие:	Отсутствует
Стилет:	0.6 мм x 69 см
Материал:	Полиамид

• Проводник

ø:	.038i
Конфигурация:	Покрытие PTFE*, прямой, fixed core
Длина:	150 см

• Толкатель

Длина:	41 см
Цвет:	прозрачный

Тип	Уретеральный катетер-Ø [F]	Стент -Ø [F]	Длина стержня стента [см]	Длина стента [см]	Номер по каталогу
Комплект для зондирования и уретерального стентирования	4	4.7*	20	24	58550030
			22	26	58550040
			24	28	58550050
	5	6	22	26	58561040
			24	28	58561050
			26	30	58561060
	5	7	22	26	58562040
			24	28	58562050
			22	26	58573040
	6	8	24	28	58573050
	6	9	22	26	58574040

* 4.7 F уретеральные стенты - тип двойной pigtail

Минимальное количество при заказе: 10 единиц